

TECAR 470 Khz

Equipamento de Tecarterapia facial e corporal
CET, RET & BIP



INCLUI:

Placa e manípulo de retorno

Manípulo bipolar

Manípulo e elétrodos **CET**

Manípulo e elétrodos **RET**

- ✓ **HIDRATAÇÃO**
- ✓ **REJUVENESCIMENTO**
- ✓ **REVITALIZAÇÃO**

- ✓ **OXIGENAÇÃO**
- ✓ **TONIFICAÇÃO**
- ✓ **REMODELAÇÃO**

Evolua com a TECAR 470KHZ

BENEFÍCIOS

- ▶ Hidrata a pele
- ▶ Aumenta a elasticidade
- ▶ Restaura o aspecto geral
- ▶ Favorece o crescimento do cabelo
- ▶ Trata a queda do cabelo
- ▶ Anti-celulite
- ▶ Anti-flacidez
- ▶ Alívio da dor
- ▶ Reduz rugas e linhas de expressão
- ▶ Efeito lifting anti-age
- ▶ Refirma a pele do pescoço e colo do peito
- ▶ Melhora aspectos das olheiras

TECNOLOGIA 470 KHZ

O aumento controlado da temperatura em várias zonas do corpo como resultado da corrente elétrica de alta frequência transmitida através de electrodos colocado sobre a superfície da pele, com o objectivo de aumentar o fluxo sanguíneo e provocar benéficos efeitos biológicos, tanto a nível estético, como médico.

PORQUÊ OS 470 KHz?

É a frequência adequada para a correcta mobilização de iões, cujo fluxo no meio extracelular e intra-celular faz como que o potencial eléctrico da célula se equilibre e o tecido recupera as suas funções vitais. Combina-se os modos capacitivo e resistivo para obter excelentes resultados de revitalização, rejuvenescimento, redução de gordura e remodelação corporal, hidratação e tonificação.



Incremento do fornecimento de oxigénio



Aumento do circulação de nutrientes



Estimulação do sistema imunitário





Eliminação de toxinas




Incremento do metabolismo

EFEITOS NA PELE

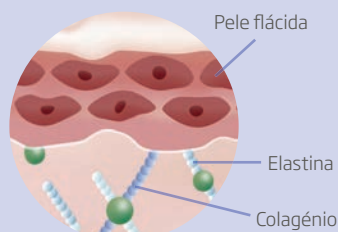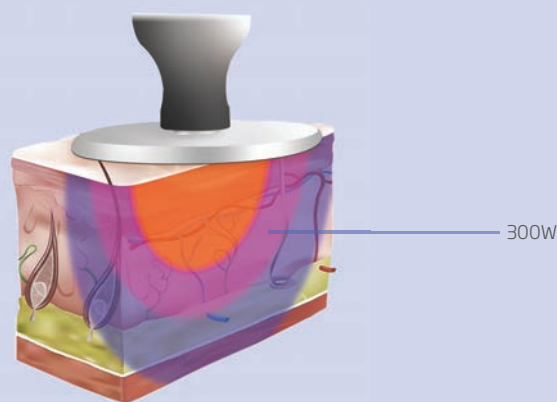

Camadas de pele com perda de colagénio pela idade

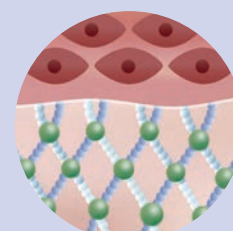

Camadas de pele perfeitamente tratada pela Tecarterapia

Descubra mais sobre esta tecnologia

COMO FUNCIONA

- ▶ Estimula o processo de cicatrização fisiológica para acelerar o tempo de recuperação da função motora
- ▶ Ativa o colagénio e a regeneração da elastina
- ▶ Mistura e queima a gordura para o contorno corporal
- ▶ Promove o relaxamento muscular para o alívio de dores

TECNOLOGIAS DE PONTA

Os resultados na Estética Profissional causaram uma revolução tecnológica, uma vez que, a **Tecarterapia** é o 1º regenerador cutâneo através da transferência eléctrica.

É um tratamento com garantia profissional e bem-estar para o cliente, com um método único no mercado de estética profissional com protocolos próprios, que permite realizar todo tipo de tratamentos faciais, capilares e corporais

Esta tecnologia clinicamente comprovada, com resultados desde as primeiras sessões, actua desde o interior melhorando o funcionamento celular em todo tipo de tratamentos estéticos. É uma solução de beleza, saúde e bem-estar, indolor que responde a necessidades dos clientes, com a garantia de qualidade de resultados.

EFEITOS BIOLÓGICOS

A **Tecarterapia** gera vários processos biológicos a nível celular e três ações básicas em todo os tipos de tecidos.

ATÉRMICO: Bio-estimulação

Ativação do metabolismo e da nutrição celular e, por consequência, a circulação na matriz extracelular.

TÉRMICO: Bio-estimulação+ Microcirculação

Incremento da vasodilatação, melhorias no fluxo sanguíneo, oxigenação dos tecidos e celular e drenagem linfática.

HIPERTÉRMICO: Bio-estimulação+ Microcirculação+

Hiperactivação

Ativação do metabolismo e enzimas, desintoxicação dos tecidos, drenagem de produtos catabólicos, estimulação dos mecanismos endógenos de recuperação.

CET

Transferência eléctrica Capacitiva

Especialmente adequado para tecidos moles (músculos e sistema linfático/vascular)
Atua nas camadas mais superficiais, subcutaneas e fluidas



RET

Transferência eléctrica Resistiva


Atua a nível mais profundo sobre o tecido mais denso adiposo com fibrose caracterizados por uma maior resistência (ossos, articulações, tendões, ligamentos e cartilagem)



BIP

Bipolar


Atua nas camadas mais superficiais da pele

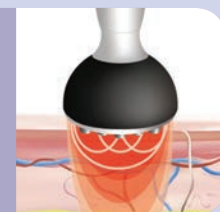

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO	Diatermia TECAR 470 KHz
FREQUÊNCIA	470 KHz
POTÊNCIA	300W
CONSUMO	370VA
VOLTAGEM	100~ 250 VAC, 50/60 Hz
OPCIONAIS	Conector em forma Y (para ambas as mãos): para CET, para RET H/P: CET H/P, RET H/P RET 60mm, CET 60mm, Eléctrodo RET 60mm
PESO	5.3kg (exclui acessórios)
DIMENSÕES	415x350x200mm
ACESSÓRIOS/ELETRODOS	CET: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm RET: 30mm, 60mm, 80mm BIP 45mm Placa e barra de retorno Manipulos CET, RET e BIP
SAÍDA DA POTÊNCIA	CET: 300W (500Ω) RET : 170W (100Ω) BIP: 45W

INTERFACE GRÁFICO Ecrã 7'

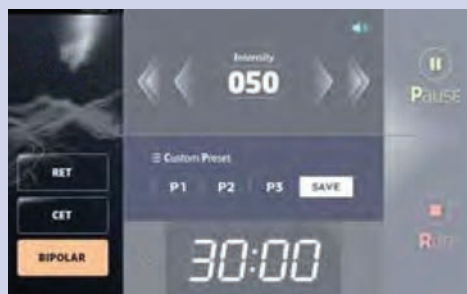

Pré-definições intuitivas para uma rápida aprendizagem e de fácil utilização.

TECAR 470KHZ

Inclui:

- ▶ Placa e manípulo de retorno
- ▶ Manípulo bipolar
- ▶ Manípulo e eléctrodos CET
- ▶ Manípulo e eléctrodos RET

